



Pulsewave[®] Quick Start Guide

1


Contents

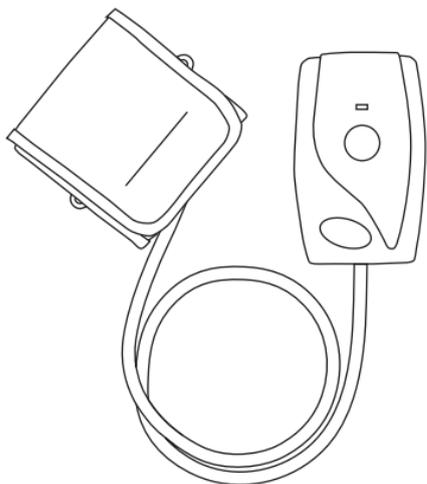

Pulsewave® PAD
(Pulse Acquisition Device)
with Inflatable Wrist Cuff

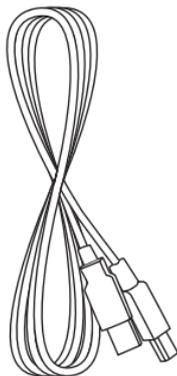

USB cable

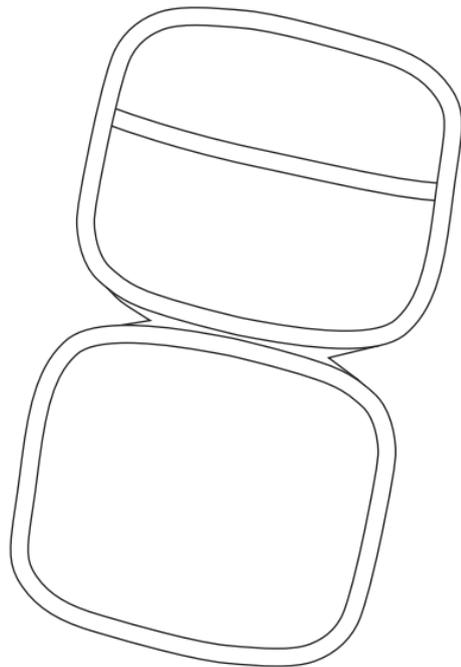


Carrying Pouch

2

Connect


Connect USB cable to the Pulsewave® device.

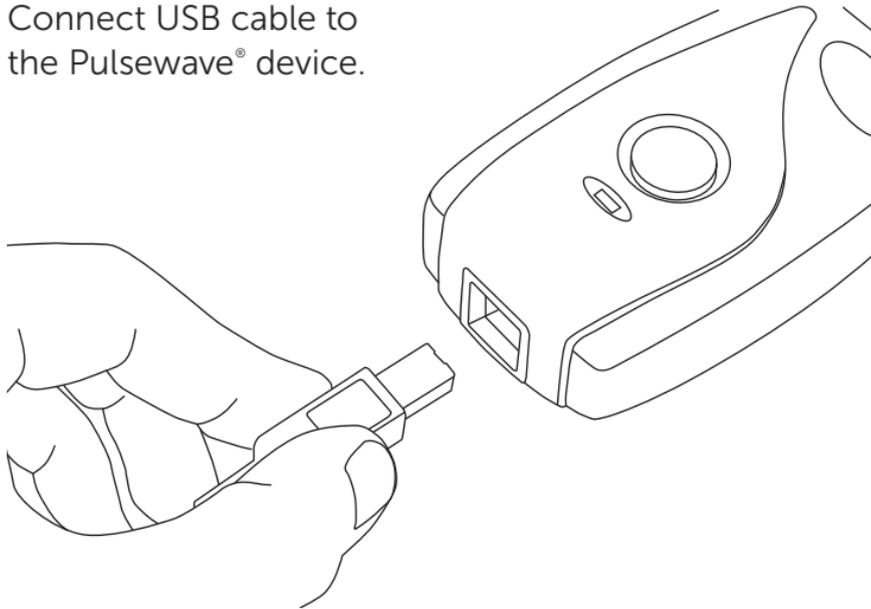

3

Connect

Connect USB
cable to your
computer.

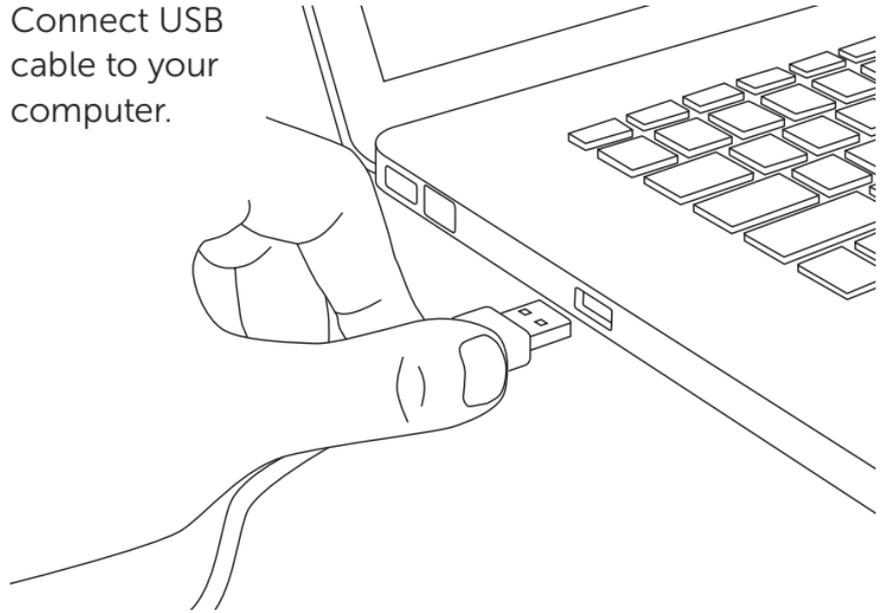

4

Register


If you have your user name and password, please skip to step 5. Otherwise, please visit **www.pulsewavedx.com** and create your account.



5

Log in


Please visit www.pulsewavedx.com and log in with your user name and password.

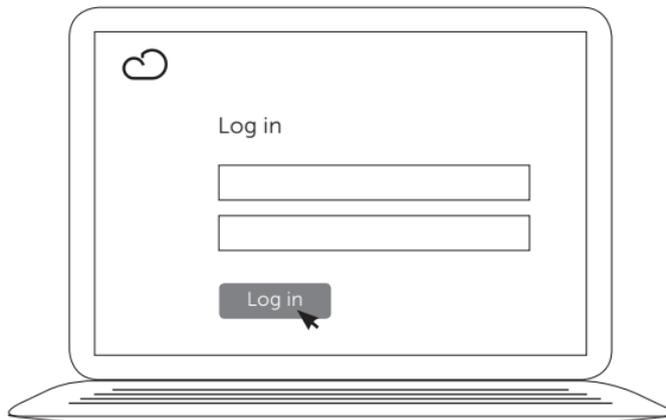

6

Attach cuff

Follow the on-screen instructions to properly put the cuff on your arm.

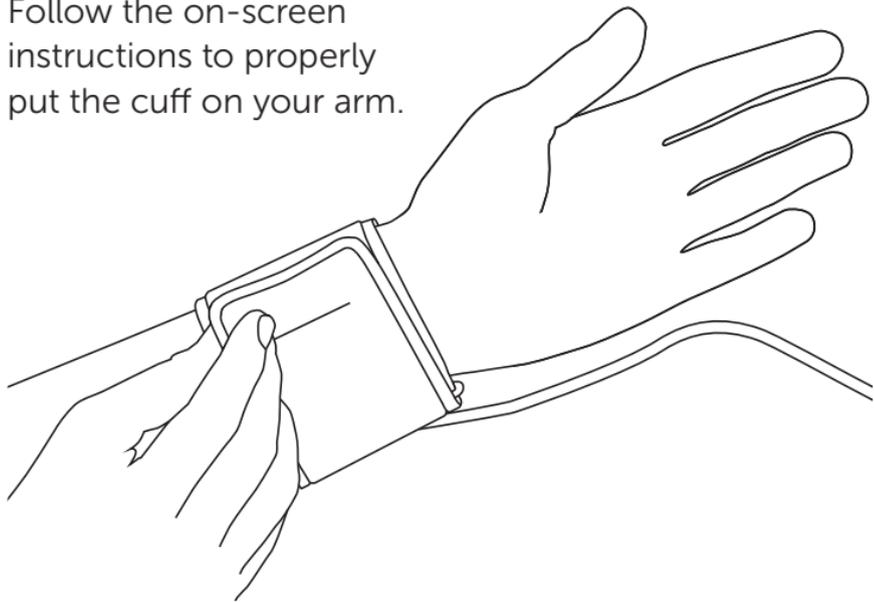

7

Take a reading


Press the start button to take a reading.



8

Install

If this is your first time you may be prompted to install our plug-in. If prompted, install required software and follow instructions on the screen. When completed, your Pulsewave® will be ready for use.

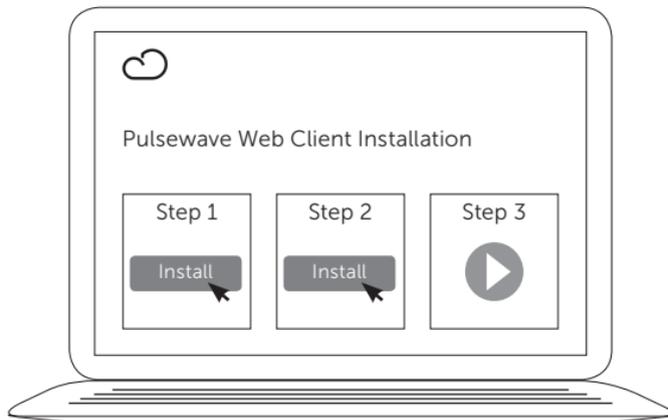

9

Support

Cloud DX maintains a convenient support web interface that includes an extensive knowledge base, describing all of the functions of Pulsewave®. Please explore the knowledge base here:

<https://support.pulsewavedx.com>

For more information and to receive answers to your questions, please contact Cloud DX Support:

Telephone: **Toll Free: 1-888-543-0944 x207**

Email: **support@clouddx.com**

Hours: **Monday - Friday 9:00 - 17:00 Eastern Time**

Things to know

- ❖ Intended for use only by adults (18 years or older).
- ❖ Not intended to replace regular medical examinations.
- ❖ Do not adjust your medication, diet, or lifestyle without first consulting a physician.
- ❖ Do not use the cuff on skin with cuts, scrapes, open wounds etc.

Conditions that adversely affect use

- ❖ Temperature and relative humidity outside the specified operating range
(refer to Technical specifications at pulsewavedx.com)
- ❖ Mechanical vibrations
- ❖ Incorrect positioning of the cuff
(eg. placed too far up from the wrist, too loose or too tight)
- ❖ Wrist not aligned at heart level
- ❖ Any movement, including talking, during the reading
- ❖ Your physiological condition (such as arrhythmias, and pregnancy)



 Manufactured by:

Cloud DX Inc.

#119 - 151 Charles Street West
Kitchener ON
N2G 1H6
clouddx.com



European Representative:
Advena Ltd., Pure Offices
Plato Close, Warwick CV34 6WE UK

Customer Support:
1-888-543-0944 ext 207
support@clouddx.com

© 2015 Cloud DX Inc

Version 4, SGPWEN40

FDA
CLEARED


**HEALTH
CANADA**
LICENSED




Pulsewave[®] départage rapide guide

1


Contenu

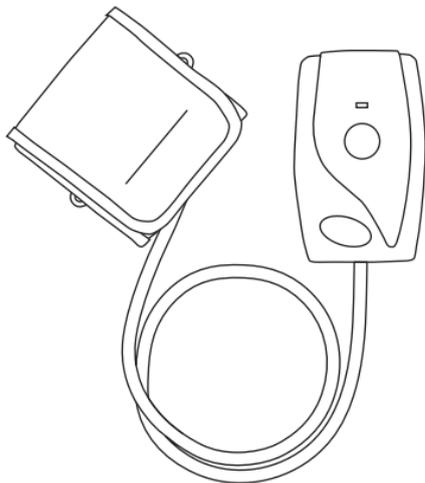

Pulsewave® PAD
(Dispositif de mesure du
rythme cardiaque)
avec Bracelet gonflable

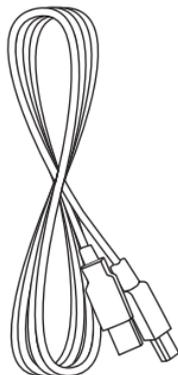

Câble USB

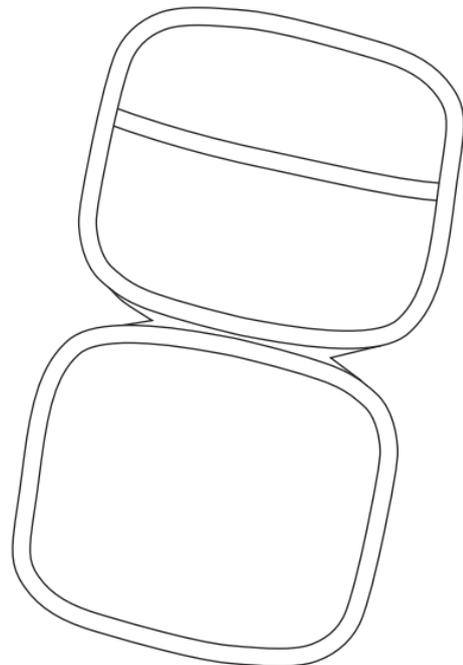


Sac de Transport

2

Relier


Connectez USB Câble à la dispositif Pulsewave®.

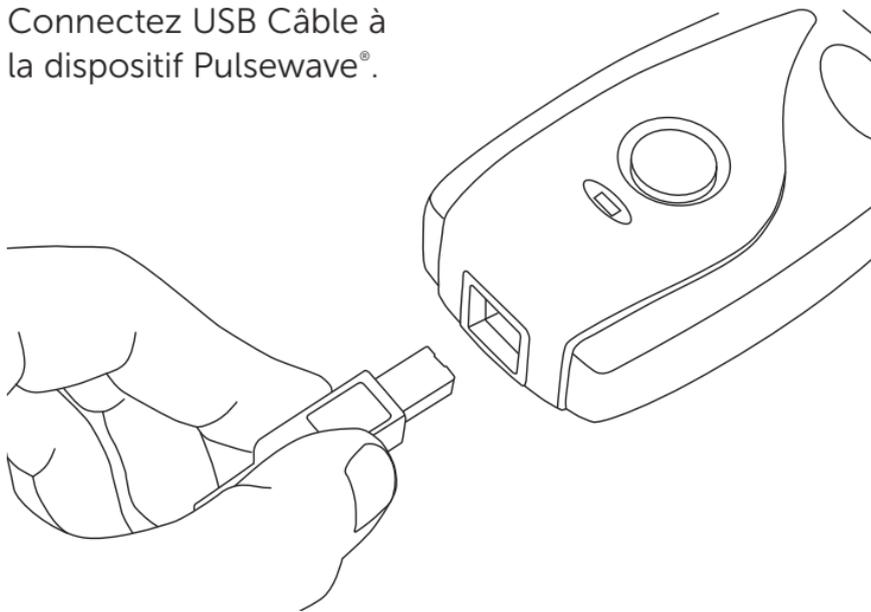

3

Relier

Connectez USB
câble à votre
ordinateur.

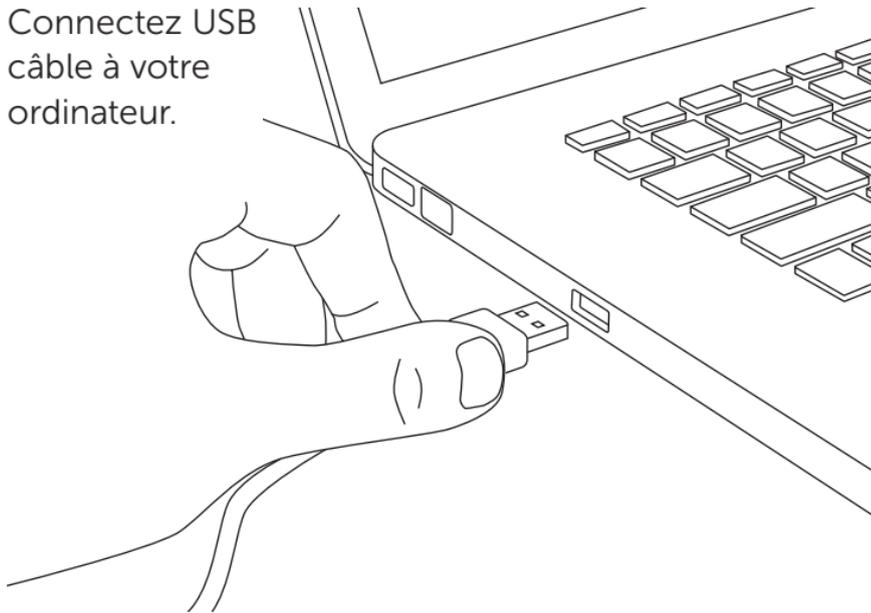

4

Se enregistrer


Si vous avez votre nom d'utilisateur et mot de passe, se il vous plaît passez à l'étape 5. Sinon, se il vous plaît visitez www.pulsewavedx.com et créez votre compte.



5

S'identifier

Se il vous plaît visitez www.pulsewavedx.com et vous connecter avec votre nom d'utilisateur et mot de passe.

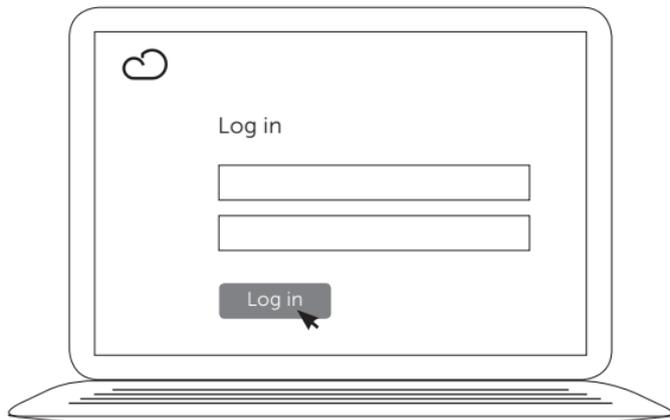

6

Attacher le brassard


Suivez l'écran sur instructions correctement placez le brassard sur votre bras.



7

Jetez un Lecture


Appuyez sur le bouton de démarrage pour effectuer une lecture.

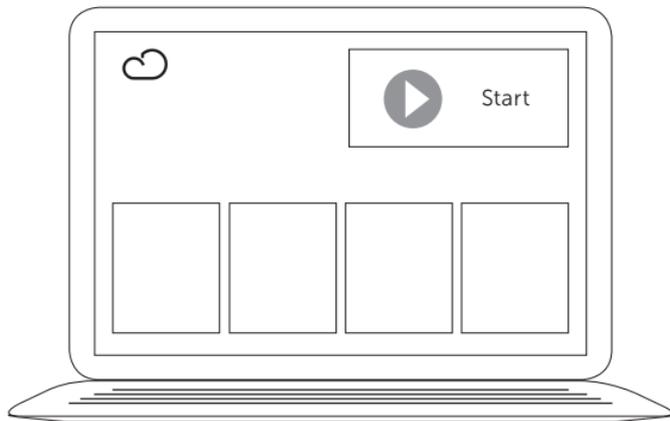

8

Installer

Si ce est votre première fois que vous pouvez être invité à installer notre plug-in. Si vous êtes invité, installer le logiciel requis et suivez les instructions à l'écran. Une fois terminé, votre Pulsewave® sera prêt à l'emploi.

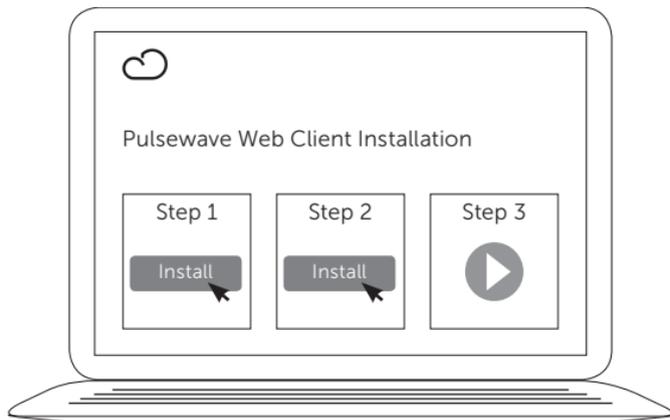

9

Soutien

Cloud DX maintient une bande de support pratique interface qui comprend une vaste base de connaissances, décrivant l'ensemble des fonctions de Pulsewave®. se il vous plaît explorer la base de connaissances ici:

<https://support.pulsewavedx.com>

Pour plus d'informations et de recevoir des réponses à votre questions, se il vous plaît contacter le Support Cloud DX:

Téléphone: **Sans frais: 1-888-543-0944 x207**

Email: **support@clouddx.com**

Heures d'ouverture:

Lundi - Vendredi 9h00-à-17h00 heure de l'Est

Choses à savoir

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes majeures uniquement (18 ans ou plus).
- ❖ Cet appareil ne doit aucunement remplacer les examens périodiques chez votre médecin.
- ❖ Consultez votre médecin avant de modifier ou rajuster la posologie d'un médicament, de modifier votre alimentation ou votre mode de vie.
- ❖ N'utilisez pas le bracelet sur une peau présentant des coupures, des égratignures ou des blessures ouvertes.

Conditions qui peuvent altérer l'utilisation de l'appareil

- ❖ La température et humidité en dehors de sa plage de fonctionnement spécifiée (Consultez les spécifications techniques – www.pulsewavedx.com)
- ❖ Vibrations mécaniques
- ❖ Position incorrecte du bracelet (ex: porté trop loin du poignet, pas assez ou trop serré)
- ❖ Si le bracelet n'est pas aligné au niveau du coeur
- ❖ Si vous faites quelque mouvement que ce soit, même parler pendant les mesures
- ❖ Votre état physiologique (comme pas exemple arythmie et grossesse)



 Fabriqué par:

Cloud DX Inc.

#119 - 151 Charles Street West

Kitchener ON

N2G 1H6

clouddx.com



Représentant européen:

Advena Ltd., Pure Offices

Plato Close, Warwick CV34 6WE UK

Service client:

1-888-543-0944 ext 207

support@clouddx.com

© 2015 Cloud DX Inc

Version 3, SGPWFR30

APPROUVÉ
PAR LA
FDA

AUTORISÉ PAR
**SANTÉ
CANADA**

